

# Caneta para Alívio da Dor

Produto disponível na [Keshe Foundation Store](#)

Este artigo faz parte do KF Plasma Times Outubro 2018



Após anos de estudo em campos plasmáticos e suas aplicações no corpo humano através dos seus fluxos de energias, a Fundação Keshe apresenta-lhes hoje a Caneta da Dor.

A Caneta da Dor é o que você precisa se você sofre de:

- Dor crônica;
- Dores musculares;
- Estiramentos, entorses;
- Tendinite;
- Dor no pulso;
- Síndrome do túnel do carpo;
- Dores nas costas;
- Dor no joelho.


A Caneta da Dor é o melhor custo benefício em inovação para o alívio da dor, comprovado com sucesso. Ela emite campos de plasma que penetram até 3cm abaixo da pele, ajudando o corpo a voltar ao seu estado de equilíbrio. Como?

Utilizando a Tecnologia do Plasma, que se baseia na interação dos campos magnético-gravitacional, trabalhando diretamente sobre os fluxos de energia que contribuem para aliviar a dor do corpo.

Basta aplicar a ponta da caneta nas áreas afetadas durante 30-40 segundos por tratamento, até 5 vezes ao dia. Os campos ficarão equilibrados e o corpo também.

Tradução feita por Buscadores de Conhecimento da Fundação Keshe Brasil


Grupo Oficial no Telegram: Keshe Brasil Knowledge Team [https://t.me/keshe\\_brasil](https://t.me/keshe_brasil)

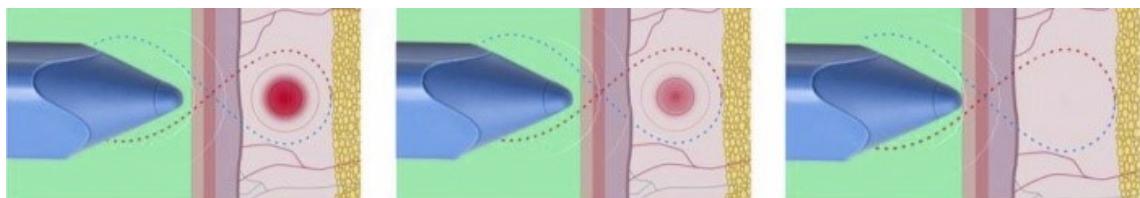


1. Dor

2. Reduzindo a dor

3. Sem dor

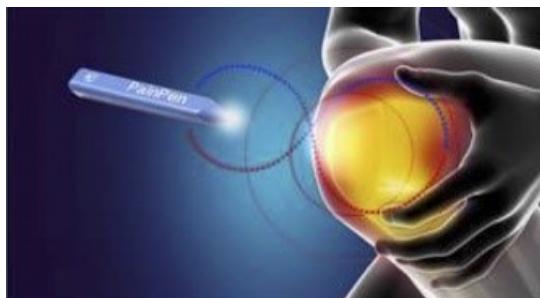

1. Joelho com dor

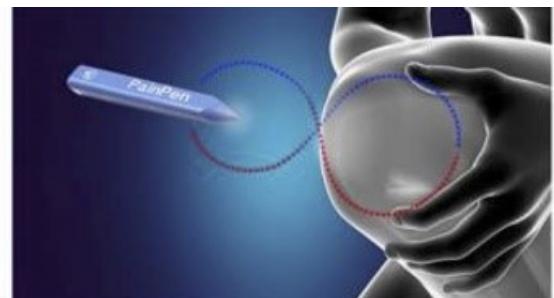

2. Joelho sem dor

A Caneta da Dor não possui partes móveis ou baterias, é leve, durável, portátil e versátil, você pode andar com ela o dia todo no bolso da camisa ou na bolsa, mala ou até usá-la sob a roupa.

Para limpar a Caneta da Dor basta lavar com água e sabão neutro e manter longe de metais ou fontes de campos eletromagnéticos como rádios, TVs, telefone celular ou computadores.

A Caneta da Dor não deve ser aplicada em certas partes do corpo como:

- Olhos e/ou região dos olhos;
- Região peitoral sobre o coração;
- Parte frontal da garganta;
- Parte neurológica do crânio (cérebro);
- Infecções;
- Órgãos internos;
- Pacientes com febre (temperatura elevada);
- Feridas abertas;
- Grávidas e Lactantes;
- Áreas com implantes/dispositivos metálicos/ elétricos e marcapasso.

Site Oficial da Fundação Keshe: <https://keshe.foundation>

Wikipédia em Língua Inglesa da FK: [https://en.kfwiki.org/wiki/KF\\_Wiki](https://en.kfwiki.org/wiki/KF_Wiki)

Tradução feita por Buscadores de Conhecimento da Fundação Keshe Brasil

Grupo Oficial no Telegram: Keshe Brasil Knowledge Team [https://t.me/keshe\\_brasil](https://t.me/keshe_brasil)